




effektiv, einfach & sicher bei

- chronischen und akuten Schmerzen
- Spannungskopfschmerzen / Migräne
- Nackenschmerzen / -verspannungen
- Rücken- / Schulterschmerzen
- Gelenkschmerzen (z.B. Hüfte, Knie, Kiefer)
- Muskelschmerzen
- Wirbelsäulensyndromen (HWS, BWS, LWS)
- Ischiasnervbeschwerden
- rheumatischen Beschwerden
- Menstruationsbeschwerden
- Durchblutungsstörungen
- Trigeminusneuralgien u.v.m.

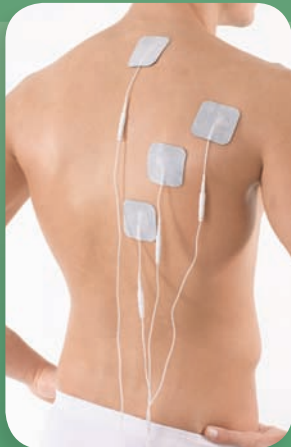

Für mehr Informationen besuchen Sie doch einfach unsere Website www.saneo-line.com

Weitere Produkte der SaneoLINE



Ich bin entspannt!



Massage

- Klopf-, Greif- und Rüttelmassage
- Anti-Stress-Massage
- Anti-Zellulitis-Massage
- Strömungsmassage
- Massage gegen schwere Beine
- Gesichtsmassage zur Pflege und Straffung der Haut
- Aktivierungsmassage u.a.



Ich bin in Form!



Muskeltraining

- Straffung/Festigung von Po u. Bauch
- Unterstützung aktiver Sportarten
- Muskelwachstum/-kräftigung an Brust, Armen und Beinen
- Aufwärmen vor dem und Erholung nach dem Training
- Schmerzlinderung bei Sportverletzungen



Schmerzlinderung

durch elektrische Nervenstimulation (TENS)

Ich bin gesund!



Dieses Produkt erhalten Sie auch in Ihrer Apotheke! PZN 6443431



tic Medizintechnik
GmbH & Co. KG

Endelner Feld 9 • D - 46286 Dorsten
info@saneo-line.com
Hotline +49 (0) 18 05 . 18 15 18
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

06/2010 / R1 CG

Deutsche Markenqualität



Das **SaneoTENS** ist ein digitales Therapiegerät, welches Ihre Schmerzen ganz ohne Medikamente und Nebenwirkungen behandelt. TENS (Transkutane Elektrische Nervenstimulation) ist seit über 40 Jahren in der Medizin wissenschaftlich anerkannt und bewährt.



- 19 Programme (3 davon individuell einstellbar)
- 4 selbstklebende, wiederverwendbare Elektroden (50 x 50 mm)
- 2 getrennt regelbare Kanäle zur Behandlung verschiedener Körperregionen

Sanfte elektrische Impulse, welche Sie als angenehmes Kribbeln auf der Haut wahrnehmen, regen bei der Behandlung chronischer Schmerzen die Ausschüttung von schmerzstillenden, körpereigenen Substanzen (z.B. Endorphine) an.

Meistens spüren Sie schon nach wenigen Minuten ein Nachlassen der Schmerzen. Diese Linderung hält gewöhnlich auch nach der Therapie noch an. Gute Besserung!

Bei der Behandlung akuter Schmerzen blockieren bzw. verringern die Impulse die Weiterleitung des Schmerzempfindens an das Gehirn.



- einfache, intuitive Bedienung
- inkl. Clip zur Befestigung am Gürtel
- großes Display für gute Lesbarkeit
- Timerfunktion (automatisches Abschalten)
- umfangreiche Sicherheitsfunktionen
- hochwertiges Zubehör (inkl. 9V-Blockbatterie)
- zertifiziertes Medizinprodukt CE_{0482}



Technische Daten

Digitales 2-Kanal-System
Stromstärke: 0 - 60 mA / Kanal
Stromform: rechteckig,
biphasisch ladungskompensiert
Frequenz: 2 - 120 Hz
Pulsbreite: 200 - 250 μs

